

WEIL DER MENSCH ZÄHLT.

QUICKELS DECAPUS® III SAUGELEKTRODENSYSTEM


DAS SYSTEM MIT GRÖSSTMÖGLICHER HYGIENE
BEI HÖCHSTER EFFIZIENZ **MIT DER CLICK-IN UND CLICK-OUT METHODE**

CLICK-IN / CLICK-OUT - Effizient und wirtschaftlich in der Anwendung durch Zeitersparnis beim Applizieren

Höchster Hygienestandard durch Verwendung von Einmalelektroden

Hohe Ableitungsqualität und damit verlässliche sowie exakte EKG Diagnostik

Mobil und einfach in der Handhabung

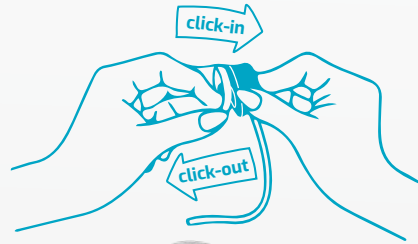

KOMPLEXE DATEN EINFACH MANAGEN

AMEDTEC ECG_{pro}®

TECHNISCHE DATEN

Pumpenmodul	Leistungsaufnahme	max. 35 W
	Abmessungen	100 mm x 240 mm x 180 mm (H x L x B)
	Gewicht	1,1 kg
Patientenmodul	Abmessungen	30 mm x 110 mm x 135 mm (H x L x B)
	Gewicht	1,1 kg
Patientenkabel	Länge	Extremitätenableitungen: 1,2 m (1,4 m optional verfügbar) Brustwandableitungen: 1,0 m (1,2 m optional verfügbar)
Elektroden	Material	Die Elektroden erfüllen die Anforderungen zur Biokompatibilität und bestehen aus einem PVC- sowie latexfreien thermoplastischen Elastomer Gehäuse, einem stark absorbierenden Filtermaterial und einer Ag/AgCl beschichteten Elektrode, welche den Empfehlungen der AAMI entspricht.
Netzteil	Netzspannung / Frequenz	100 - 240 V, 50 oder 60 Hz
	Stromverbrauch	max. 1,1 A
Akku (optional)	Laufzeit	ca. 3,5 h (entspricht ca. 50 Ruhe-EKG und ca. 10 Belastungs-EKG Untersuchungen)
	Ladedauer	ca. 2 Stunden
Stativ	Armlänge	570 / 650 mm
	Tischbefestigung	Tischplattenbreite 10 - 130 mm
Allgemein	Klassifizierung	Klasse IIa nach MDD
	Schutzklasse	I
	Anwendungsteil	Typ CF gemäß IEC 60601-1 mit Defibrillatorenenschutz
Umweltbedingungen	Temperatur	bei Betrieb: +10 bis +40 °C, bei Lagerung: -10 bis +40 °C
	Luftfeuchte	25 - 95 %, keine Kondensation
	Luftdruck	700 - 1060 mbar

ZUBEHÖR




QuickOne® Einmalelektroden
Elektrodenwechsel nach jedem Patienten
1 VPE = 1000 Stück



Quickels® Filterelektroden
Elektrodenwechsel mind. nach jedem 10. Patienten
1 VPE = 128 Stück

AMEDTEC Medizintechnik Aue GmbH
Schneeberger Straße 5 · 08280 Aue
Tel.: +49 (0)3771 59 82 70
Fax: +49 (0)3771 59 82 790
info@amedtec.de · www.amedtec.de

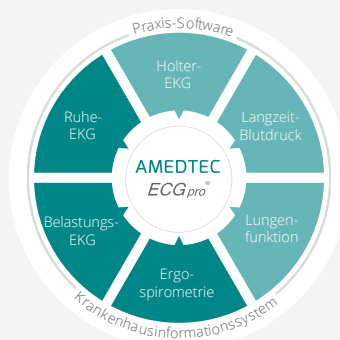

Hersteller:
Cardiolex Medical AB
Sundbybergsvägen 1C
SE-171 73 Solna, Schweden

CE Zertifikat:
0413 ISO 13485

Irrtümer und Änderungen vorbehalten
M0685 018-0615-2_02